


Leczenie stomatologiczne małych zwierząt

pro
veterinary experts



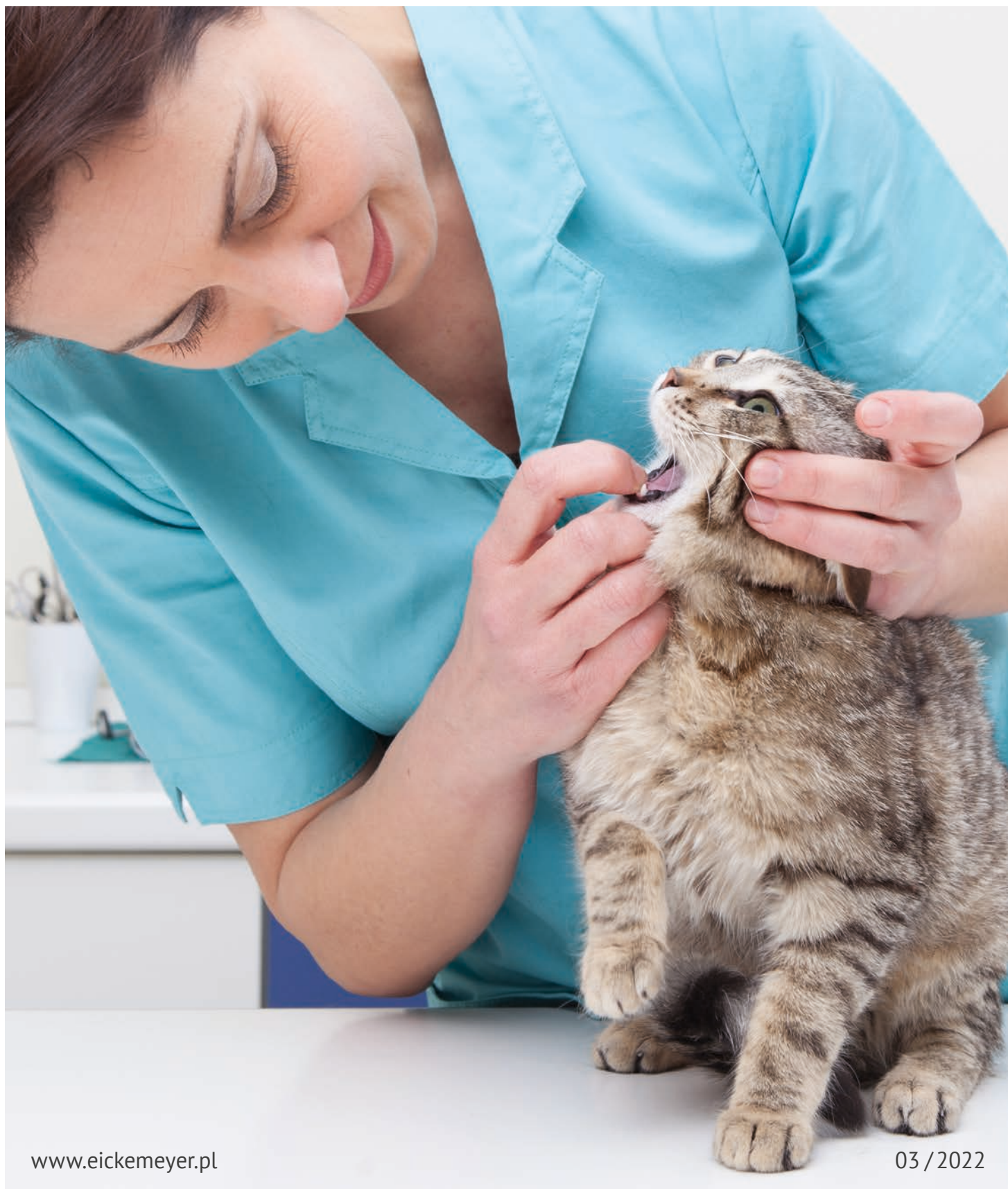

176535

HiRay DENTAL Urządzenie RTG

Dokładne, niezawodne i ergonomiczne urządzenie rentgenowskie DENTAL HiRay – wysokiej częstotliwości, oferuje łatwe w obsłudze funkcje, najlepszą wydajność i doskonałą jakość obrazu.

Aby osiągnąć cel, jakim jest najwyższa jakość i niezawodność, HiRay DENTAL umożliwia krótkie czasy ekspozycji, znaczną redukcję dawki dla pacjenta oraz powtarzalne, wysokiej jakości zdjęcia rentgenowskie.

- Mniejsza dawka dla pacjenta, wyższa rozdzielczość dla lekarza weterynarii
- Proste, intuicyjne i bezpieczne
- Przemysłany design i krótki czas ekspozycji pomagają przyspieszyć przebieg pracy
- Stabilne ramiona gwarantują precyzyjny ruch liniowy w celu zmniejszenia ryzyka poruszania się lampy podczas robienia zdjęcia
- Tworzy obrazy o najwyższej jakości dzięki małej ogniskowej (0,4 mm), przy wykorzystaniu czy to filmów, płyt obrazowych lub czujników cyfrowych

Dane techniczne

- Ogniskowa: 0,4 mm
- Czas ekspozycji: 0,01 – 2 sek.
- Wysokie napięcie: 60 – 65 – 70 kVp
- Prąd anodowy: 5 mA
- Minimalna odległość od skóry: 200 mm
- Całkowita filtracja: > 2 mm Al eq.
- Obszar napromieniowania: przy 200 Ø 55 mm
- Zasilanie: 120 – 230 V (± 10 %)

Numer art.

176530	HiRay DENTAL – Model ścienny <ul style="list-style-type: none"> • Maksymalny zasięg: ok. 1,98 m • Klient jest odpowiedzialny za prawidłowy montaż
176535	HiRay DENTAL – Model na statywie <ul style="list-style-type: none"> • Maksymalny zasięg: ok. 1,30 m

Przenośna stomatologiczna maszyna rentgenowska

Innowacyjny przenośny system rentgenowski – poręczny i lekki

System bezprzewodowy umożliwia wykonywanie zdjęć rentgenowskich o wysokiej rozdzielczości w dowolnym miejscu. Otrzymałeś aparat RTG, który wykorzystasz w dowolnym miejscu swojej kliniki. Akumulator litowo-polimerowy o długiej żywotności należy ładować dopiero po 400 ujęciach.

Ponadto różne czasy ekspozycji dla różnych zębów mogą być przechowywane i wyświetlane na ekranie LCD. Ponadto niski poziom promieniowania chroni Ciebie i Twoich pacjentów.

Dane techniczne

- Czas ekspozycji: 0,5 – 0,7 sek.
- Napromieniowane pole: 0,6 mm
- Typ lampy rentgenowskiej: wysoka częstotliwość
- Moc: 180 W
- Napięcie: 60 kV
- Natężenie: 2 mA
- Akumulator: litowo-polimerowy
- Wymiary (w cm): dł. 20 x szer. 15 x gł. 14,5
- Waga: 2,35 kg

Numer art.

176540	Przenośna stomatologiczna maszyna rentgenowska
--------	--



DigiVet DR Dental X-Ray Sensor – Rozmiar 2

Czujnik rentgenowski DigiVet DR Dental umożliwia nagrywanie wysokiej jakości, rentgenowskich zdjęć cyfrowych. Dzięki oprogramowaniu METRON możliwe jest natychmiastowe diagnozowanie.

- Scyntylicator CsI o wysokiej rozdzielczości z portem USB
- Zaokrąglone rogi dla większego komfortu pacjenta

Dane techniczne


- Obszar aktywny: 34 x 26 mm
- Rozdzielczość: 20 lp/mm
- Rozmiar piksela: 20 x 20 mikronów
- Liczba pikseli: 2,21 miliona
- Wymiary (w mm): dł. 42 x szer. 31 x dł. kabla 5 lub 13

METRON Dental Software

- Intuicyjne oprogramowanie do akwizycji i edycji obrazu
- Zintegrowany interfejs DICOM
- Umożliwia łatwe przechowywanie zdjęć
- Tabele zębów pomocne przy klasyfikacji zdjęć
- Możliwość generowania modeli 3D

Numer art.

708032 DigiVet DR Dental X-Ray Sensor –
Rozmiar 2

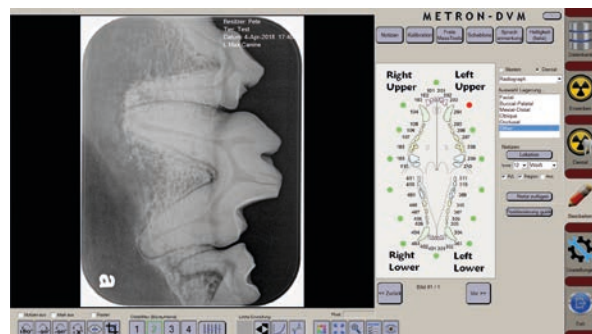

Oprogramowanie METRON – przykładowy widok

Eickemeyer

*Najwyższa jakość
dla Twojej praktyki
weterynaryjnej*



© Martin Carlsson – stock.adobe.com



Przykład zastosowania

DigiVet CR PLUS Dental Reader

Kompaktowy, łatwy w użyciu dentystyczny czytnik CR do szybkich i wysokiej jakości cyfrowych obrazów rentgenowskich – teraz w wyższej rozdzielczości.

Łatwy w użyciu czytnik dentystyczny DigiVet CR PLUS zapewnia teraz jeszcze bardziej doskonałą jakość obrazu. Dzięki rozdzielczości 21 lp/mm system ten nie pozostawia nic do życzenia.

Dzięki funkcji „Push-and-go” tworzenie obrazów – nawet dla niedoświadczonych osób, jest dziecinnie proste.

W pakiecie startowym znajdują się 2 najważniejsze folie do zapisu- większa- do rentgena dentystycznego oraz oryginalna folia w rozmiarze 4c. Co ważne, prawdziwy rozmiar 4c obrazu jest dostępny, dzięki czemu nie trzeba używać oprogramowania do łączenia obrazów. Wbudowana funkcja kasowania eliminuje potrzebę dodatkowego urządzenia.

- Dzięki swojemu małemu formatowi nadaje się nawet do najmniejszych praktyk
- Mogą być użyte dotępane urządzenia rentgenowskie
- W opcji podglądu na ekranie czytnika, może być łatwo sprawdzona jakość obrazu
- Łatwy w obsłudze: użytkownik jest prowadzony krok po kroku, dzięki wizualizacji na ekranie – eliminuje skomplikowany trening
- Samodzielna kalibracja dla stabilności i długotrwałej wydajności

Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do przetwarzania obrazu

Dzięki dołączonemu oprogramowaniu przechwytywanie i zarządzanie obrazem jest zoptymalizowane.

Przyjazne użytkownikowi oprogramowanie ułatwia funkcjonowanie w praktyce weterynaryjnej i nie wymaga dużego treningu: Aby upewnić się, że skany są przypisane do odpowiednich pozycji, operator po prostu wybiera odpowiedni ząb na wykresie stomatologicznym oprogramowania.

Numer art.

708035	DigiVet CR PLUS Dental Reader
70803122	12 miesięczna gwarancja (opcja)
70803123	24 miesięczna gwarancja (opcja)
70803124	36 miesięczna gwarancja (opcja)
70803125	48 miesięczna gwarancja (opcja)

Akcesoria do DigiVet CR PLUS Dental Reader	
Numer art.	
70803101	Zestaw startowy folii do zapisu, składający się z: <ul style="list-style-type: none"> • 4x rozmiar 2 (31 x 41 mm) • 1x rozmiar 4c (48 x 54 mm)
70803102	Zestaw folii do zapisu – rozmiar 0 <ul style="list-style-type: none"> • 4x rozmiar 0 (22 x 31 mm)
70803103	Zestaw folii do zapisu – rozmiar 1 <ul style="list-style-type: none"> • 4x rozmiar 1 (24 x 40 mm)
70803104	Zestaw folii do zapisu – rozmiar 2 <ul style="list-style-type: none"> • 4x rozmiar 2 (31 x 41 mm)
70803105	Zestaw folii do zapisu – rozmiar 3 <ul style="list-style-type: none"> • 4x rozmiar 3 (27 x 54 mm)
70803106	Zestaw folii do zapisu – rozmiar 4c <ul style="list-style-type: none"> • 1x rozmiar 4c (48 x 54 mm)
E70803106	Pojemnik do przechowywania folii do zapisu RTG
70803115	Folia ochronna rozmiar 0 <ul style="list-style-type: none"> • W celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi • Opakowanie 100 sztuk
70803116	Folia ochronna rozmiar 1 <ul style="list-style-type: none"> • W celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi • Opakowanie 100 sztuk
70803117	Folia ochronna rozmiar 2 <ul style="list-style-type: none"> • W celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi • Opakowanie 100 sztuk
70803118	Folia ochronna rozmiar 2 <ul style="list-style-type: none"> • W celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi • Opakowanie 100 sztuk
70803119	Folia ochronna rozmiar 3 <ul style="list-style-type: none"> • W celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi • Opakowanie 100 sztuk
70803120	Folia ochronna rozmiar 4c <ul style="list-style-type: none"> • W celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi • Opakowanie 100 sztuk
70803108	Ostony higieniczne rozmiar 0 <ul style="list-style-type: none"> • Opakowanie 100 sztuk
70803109	Ostony higieniczne rozmiar 1 <ul style="list-style-type: none"> • Opakowanie 100 sztuk
70803110	Ostony higieniczne rozmiar 2 <ul style="list-style-type: none"> • Opakowanie 100 sztuk
70803111	Ostony higieniczne rozmiar 2 <ul style="list-style-type: none"> • Opakowanie 300 sztuk
70803112	Ostony higieniczne rozmiar 3 <ul style="list-style-type: none"> • Opakowanie 100 sztuk
70803113	Ostony higieniczne rozmiar 4c <ul style="list-style-type: none"> • Opakowanie 100 sztuk
E70803101	Zasilacz
E70803104	Kabel zasilający
E70803102	Kabel połączeniowy USB 2.0
E70803103	Kabel internetowy <ul style="list-style-type: none"> • CAT.5E FTB (Cross-Over) • Długość: 2 m
E70803107	Zapasowy klucz do DigiVet CR Dental Reader (do licencji na oprogramowanie)



70803104



E70803106



70803113



174023



174022

Profident mobilna jednostka dentystyczna

Jednostka dentystyczna Profident jest sumą wielu lat doświadczeń w dziedzinie stomatologii i oferuje szeroki wachlarz zastosowań. Czy w praktyce ogólnej czy specjalistów stomatologicznych: stomatologiczne urządzenie Profident oferuje przejrzysty i nowoczesny design, w połączeniu z dużą mobilnością i niskim zapotrzebowaniem na miejsce.

Stojak ma regulowaną wysokość i rozmieszczone ergonomicznie końcówki. Wszystkie jednostki dentystyczne Profident wyposażone są w automatyczną aktywację rękojeści. Trójdrożna strzykawka (powietrze/ woda/spray) jest obrotowa, łatwo wyjmowalna i nadaje się do autoklawu, umożliwia gruntowne płukanie jamy ustnej. Dodatkowo jednostka dentystyczna Profident posiada wylot ciśnienia.

Rękojeść Low-Speed jest wyposażona w sprzęgło obrotowe i umożliwia szybką zmianę obrotowych nakładek. Rękojeść Hi-Speed z turbiną wysokoobrotową 40000 obr./min zapewnia szybką wymianę wiertel i regulowane chłodzenie wodne.

Opcjonalnie kompresor można na życzenie zintegrować ze statywem jednostki dentystycznej Profident.

Numer art.

174023	Profident mobilna jednostka dentystyczna
174022	Zestaw rękojeści z wewnętrznym systemem chłodzenia wodą, Składa się z: <ul style="list-style-type: none"> Silnik powietrzny o niskiej prędkości <ul style="list-style-type: none"> Z wewnętrznym chłodzeniem wodnym (do 20000 obr./min, dla odpowiednio skonfigurowanych unitów dentystycznych) Prostnica rękojeść prosta o małej prędkości S-Max <ul style="list-style-type: none"> 1:1, z wewnętrznym chłodzeniem wodnym (dla odpowiednio skonfigurowanego urządzenia stomatologicznego) Kątnica o małej prędkości 1:1 <ul style="list-style-type: none"> Do silnika o małej prędkości z chłodzeniem wodnym (dla odpowiednio skonfigurowanego urządzenia stomatologicznego)
174045	Zapasowa butelka na wodę do unitów stomatologicznych <ul style="list-style-type: none"> Zawartość: 750 ml
17404502	Butla zapasowa dla jednostek dentystycznych <ul style="list-style-type: none"> Zawartość: 2 litry

Eickemeyer

Zakupy lekkie
i przyjemne!
www.eickemeyer.pl



Profident PLUS mobilna jednostka dentystyczna

Jednostki dentystyczne Profident to suma wielu lat doświadczeń w dziedzinie stomatologii, oferujące szeroki zakres zastosowań. Czy to w praktyce ogólnej czy specjalistycznej: jednostki dentystyczne Profident oferują jasne i nowoczesne wzornictwo, w połączeniu z wysoką mobilnością i niskim zapotrzebowaniem na miejsce. Statyw ma regulowaną wysokość, a rękojeści są ergonomiczne ułożone. Wszystkie jednostki dentystyczne Profident wyposażone są w rękojeści z automatyczną aktywacją. Trójdrożne strzykawki (powietrze/woda/spray) są obrotowe, łatwo wyjmowalne i można je sterylizować w autoklawie, umożliwiają gruntowne płukanie jamy ustnej. Ponadto, jednostki Profident wyposażone są w wylot ciśnienia. Rękojeść Low-Speed jest wyposażona w połączenie obrotowe i pozwala na szybką zmianę nasadek obrotowych.

Opcjonalny kompresor może być zintegrowany ze statywem jednostek Profident.

Jednostka Profident PLUS posiada wbudowany skaler piezoelektryczny o wysokiej wydajności. Uchwyt ze zintegrowanym oświetleniem LED. W ten sposób masz zawsze optymalne warunki oświetleniowe. Wszystkie funkcje urządzenia mogą być wygodnie regulowane na jednostce. Rękojeść pozwala na doskonałe oświetlenie i prowadzi do lepszych wyników leczenia.

Numer art.


174024	Profident PLUS mobilna jednostka dentystyczna <ul style="list-style-type: none"> Skaler piezoelektryczny z oświetleniem, rękojeść High-Speed z oświetleniem
174022	Zestaw rękojeści z wewnętrznym systemem chłodzenia wodą, Składa się z: <ul style="list-style-type: none"> Silnik powietrzny o niskiej prędkości <ul style="list-style-type: none"> Z wewnętrznym chłodzeniem wodnym (do 20000 obr./min, dla odpowiednio skonfigurowanych unitów dentystycznych) Prostnica rękojeść prosta o małej prędkości S-Max <ul style="list-style-type: none"> 1:1, z wewnętrznym chłodzeniem wodnym (dla odpowiednio skonfigurowanego urządzenia stomatologicznego) Kątnica o małej prędkości 1:1 <ul style="list-style-type: none"> Do silnika o małej prędkości z chłodzeniem wodnym (dla odpowiednio skonfigurowanego urządzenia stomatologicznego)
176871	Końcówka wymienna do skalera G4T (Końcówka uniwersalna) <ul style="list-style-type: none"> Płaska, szpiczasta
176872	Końcówka wymienna do skalera G2T (Końcówka uniwersalna) <ul style="list-style-type: none"> Płaska, szeroka
176873	Końcówka wymienna do skalera G1T (Końcówka uniwersalna) <ul style="list-style-type: none"> Płaska, szpiczasta
176874	Końcówka wymienna do skalera P1T (Końcówka stożkowa) <ul style="list-style-type: none"> Stożkowa
174045	Zapassowa butelka na wodę do unitów stomatologicznych <ul style="list-style-type: none"> Zawartość: 750 ml
17404502	Butla zapasowa dla jednostek dentystycznych <ul style="list-style-type: none"> Zawartość: 2 litry



174024



174022

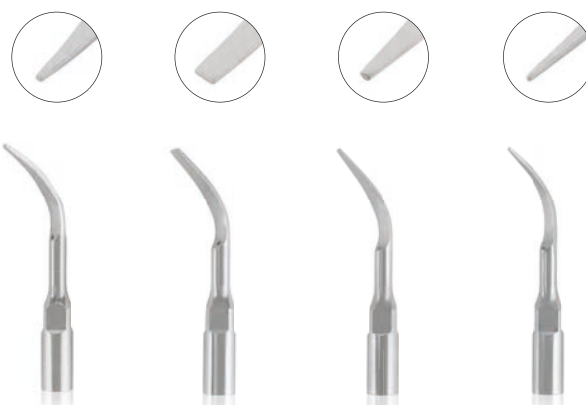

176871

176872

176873

176874



174010



17401150



17401155



174066



176782



174908



17410601



17410609



17410603



17410604



17410605

Zestaw startowy Profident / Profident PLUS

Najważniejsze akcesoria do Profident/Profident PLUS razem w zestawie.

Numer art.

174004	Zestaw składający się z:
174010	Spray do konserwacji instrumentów rotacyjnych <ul style="list-style-type: none"> • Uniwersalny spray do rękojeści, bez adaptera • Częste stosowanie zapewni rękojeści wydajność i trwałość • Nadaje się do rękojeści High & Low Speed • Zawartość: 500 ml
17401150	Adapter turbinowy <ul style="list-style-type: none"> • Do rękojeści
17401155	Dysza natryskowa „E“-Typ <ul style="list-style-type: none"> • Odpowiednie do numer art. 174010 • Do rękojeści Lowspeed
174066	Plastikowe nasadki do polerowania z gumowym kielichem na pastę polerską <ul style="list-style-type: none"> • Do prostych rękojeści • Prędkość max. 3000 obr./min. • Do jednorazowego użytku • Opakowanie 100 szt.
176782	EICKEMEYER® Dentystyczna pasta do polerowania <ul style="list-style-type: none"> • Przeznaczona do polerowania zębów po usunięciu kamienia nazębnego • Smak miętowy • Zawartość: 200 g
174908	Szczotka czyszcząca do wiertel i frezów <ul style="list-style-type: none"> • Do czyszczenia wiertel i frezów dentystycznych
17410601	Wiertło dentystyczne (HP) <ul style="list-style-type: none"> • Okrągłe • 2 sztuki
17410609	Wiertło różyczkowe do turbiny ISO23 <ul style="list-style-type: none"> • Okrągłe • 5 sztuk
17410603	Wiertło dentystyczne (FG) <ul style="list-style-type: none"> • Dla kotów • Do turbiny • Rozmiar 10 • Szpiczaste, zaokrąglone • 5 sztuk
17410604	Wiertło dentystyczne (FG) <ul style="list-style-type: none"> • Dla małych psów • Do turbiny • Rozmiar 12 • Szpiczaste, zaokrąglone • 5 sztuk
17410605	Wiertło dentystyczne (FG) <ul style="list-style-type: none"> • Dla średnich i dużych psów • Do turbiny • Rozmiar 16 • Szpiczaste, zaokrąglone • 5 sztuk

Kompresor do jednostek dentystycznych**Numer art.**

- 17430002 Kompresor do jednostek dentystycznych
- Kompatybilny ze wszystkimi jednostkami dentystycznymi EICKEMEYER®
 - Mocowany na podstawie Profident/ Profident PLUS
 - Cichy, 40 dB (A)
 - Niskie koszty utrzymania
 - Kompaktowy design
 - Potężny 340 Watt
 - 230 V, 8 bar/ 116 psi, 37 l/min
 - 6 l pojemność
 - Wymiary (w cm): dł. 45 x szer. 43 x gł. 20
- 17404301 Mikro filtr oleju
- Pomaga przedłużyć żywotność rękojeści
 - Do 0,01 % redukcji zawartości oleju w sprężarce powietrza
- 174051 Olej do kompresora dentystycznego
- Zawartość: 500 ml



17430002



17404301

Rękojeść dentystyczna High Speed (FG)

Pasujące do Profident (numer art. 174023) i Profident PLUS (numer art. 174024).

Numer art.

- 174055 Rękojeść dentystyczna High Speed z turbiną
- Szybka wymiana wiertła (Push Button)
 - Z chłodzeniem wodnym dla instrumentów rotacyjnych do 400000 obr./min
 - Dobra jakość za niską cenę
- 17402323 Rękojeść dentystyczna High Speed z turbiną z oświetleniem LED
- Szybka wymiana wiertła (Push Button)
 - Z chłodzeniem wodnym dla instrumentów rotacyjnych do 480000 obr./min
 - Z wbudowanym podświetleniem LED
 - Nie wymaga zasilania, można go łatwo podłączyć do istniejących złączy turbin
- 17405501 Rękojeść dentystyczna High Speed NSK
- Szybka wymiana wiertła (Push Button)
 - Z chłodzeniem wodnym dla instrumentów rotacyjnych do 400000 obr./min
 - Profesjonalna jakość NSK



174055



17402323



17405501



174061



17406101



17402201



174027



17402202



174026



17402205

Low Speed – silniki pneumatyczne oraz rękojeści dentystyczne

Pasujące do Profident (numer art. 174023) i Profident PLUS (numer art. 174024).

Numer art.

174061	<p>Prosta rękojeść (HP) o niskiej prędkości (Low Speed) z silnikiem pneumatycznym</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1:1, z wewnętrznym chłodzeniem wodnym • Do 20000 obr./min • Idealne do wykorzystania przy zabiegach dentystycznych gryzoni
17406101	<p>Silnik pneumatyczny o niskiej prędkości (Low Speed)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1:1, z wewnętrznym chłodzeniem wodnym • Do 20000 obr./min • Dla odpowiednio skonfigurowanego unitu stomatologicznego
17402201	<p>Silnik pneumatyczny NSK o niskiej prędkości (Low Speed)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do 20000 obr./min • Wewnętrzne chłodzenie wodą
174027	<p>Prosta rękojeść dentystyczna (HP) o niskiej prędkości (Low Speed)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idealne do wykorzystania przy zabiegach dentystycznych gryzoni • Kompatybilna z 174028, 176880
17402202	<p>Prosta rękojeść dentystyczna NSK (HP) o niskiej prędkości (Low Speed)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1:1, z wewnętrznym chłodzeniem wodnym (do odpowiednio skonfigurowanych jednostek) • Do 25000 obr./min
174026	<p>Rękojeść dentystyczna (kątnica; RA) o niskiej prędkości Low Speed</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1:1, bez silnika pneumatycznego • Z systemem przytrzymywania przycisku • Kompatybilna z 174028, 176880
17402205	<p>Rękojeść dentystyczna NSK (kątnica; RA) o niskiej prędkości (Low Speed)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do silnika Low Speed z chłodzeniem wodą (na odpowiednio skonfigurowanych jednostkach) • Do 40000 obr./min

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA Rękojeści stomatologicznych

Dzięki regularnej pielęgnacji i czyszczeniu po każdej procedurze możesz zachować pełną funkcjonalność swoich instrumentów.

1. Przygotowanie

Po każdej procedurze wyjmij rękojeść ze złącza, a następnie wyjmij wiertło (najlepiej za pomocą pęsety).

2. Zewnętrzne czyszczenie instrumentów/turbin

Rękojeść należy czyścić pod ciepłą, bieżącą wodą (np. szczoteczką do zębów), aby zmyć ścierny pył powstały przy szlifowaniu zębów lub ślinę. Nigdy nie należy czyścić instrumentów w kąpeli ultradźwiękowej!

3. Dezynfekcja instrumentów/turbin

Instrumenty można oczyszczać zewnętrznie w rozpylonej/rozproszonej wodzie/powietrzu zraszając za pomocą środków dezynfekujących. Nigdy nie zanurzaj instrumentów w roztworze dezynfekującym!

4. Pielęgnacja instrumentów/turbin

Instrumenty należy spryskać olejem pielęgnacyjnym/konserwacyjnym po każdym czyszczeniu. Spryskaj olejem konserwującym kanały instrumentów przez 1–2 sekundy. Jeśli ciecz opuszczająca rękojeść wciąż jest zabrudzona proces należy powtórzyć.



Wtryskiwanie oleju pielęgnacyjnego do kanału rękojeści za pomocą adaptera (olej konserwacyjny art. 174010, adapter art. 17401150)



Wtryskiwanie oleju pielęgnacyjnego do rękojeści za pomocą adaptera (olej pielęgnacyjny art. 174010, adapter art. 17401155)

5. Pielęgnacja oprawek zaciskowych

Swobodny ruch zacisków jest bardzo ważny dla stabilnego mocowania wiertła. Oprawki zaciskowe należy spryskać w celu konserwacji (olejem do konserwacji) przynajmniej raz w tygodniu od strony wiertła. Używaj wyłącznie szlifierek diamentowych i wiertel znanych producentów: jeśli materiał wału wiertła jest zbyt miękki, podczas pracy z takim wiertłem może dojść do uszkodzenia szcęk zaciskowych – mocujących wiertło przez powstałe podczas pracy wióry, które mogą zostać wciągnięte przez system mocowania. Wiertło zostaje zablokowane i nie może być już usunięte, dochodzi do uszkodzenia systemu napinającego.

6. Konserwacja

Ważne jest, aby wszystkie złącza instrumentów były dobrze nasmarowane olejem (numer artykułu: 563707), aby uniknąć tarcia lub korozji. Inne czynności kontrolne obejmują płynność ruchu. Oferujemy usługę naprawy instrumentów.

REGULARNE OLIWIENIE PRZEDŁUŻA ŻYWOTNOŚĆ



174030

Detergenty i środki dezynfekujące do jednostek dentystycznych

Numer art.	Zawartość
174030	Aspirmatic® Disinfectant <ul style="list-style-type: none"> • Do codziennego użycia
174031	Aspirmatic® Cleaner <ul style="list-style-type: none"> • Bardzo mocny • Do użyciu raz w tygodniu



174039

Tabletki do dezynfekcji dla Profident/Profident PLUS

- Do dezynfekcji przewodów wodnych w jednostkach stomatologicznych Profident/Profident PLUS
- Nadaje się do butelek o pojemności 0,7–1,0 litra
- Białe tabletki do codziennego czyszczenia: Za każdym razem, gdy napełniasz butelkę swojego Profident/Profident PLUS, rozpuść białą tabletkę, aby stale czyścić przewody transportujące wodę w Profident/Profident PLUS
- Pomarańczowe tabletki do intensywnego czyszczenia: tabletkę Shock należy raz na miesiąc rozpuszczać w butelce z wodą Profident/Profident PLUS i pozostawić na noc. Opróżnij butelkę przed następnym zabiegiem

Numer art.	Zawartość
174039	Tabletki do dezynfekcji dla Profident/Profident Plus <ul style="list-style-type: none"> • Zawartość: 48 tabletek + 2 pomarańczowe tabletki Shock
174035	Tabletki do dokładnej dezynfekcji dla Profident/Profident PLUS <ul style="list-style-type: none"> • Zawartość: 10 tabletek Shock do dokładnej dezynfekcji



Mobilny stojak dentystyczny

Zamienia każdy stół w stół do leczenia stomatologicznego! Dzięki mobilnemu stojakowi stomatologicznemu firmy EICKEMEYER® każda sala operacyjna lub stół zabiegowy staje się ergonomicznym stołem do leczenia stomatologicznego.

- Dostosowany do montowania do stołów operacyjnych
- Ergonomiczna półokrągła wanna z kratą
- Wanna do czyszczenia łatwo zdejmowalna
- Ze stali nierdzewnej
- Statyw z czterema rolkami
- Regulacja wysokości od 75–100 cm
- Wymiary myjki / wanienki (w cm): szer. 50 x gł. 35

Numer art.	Zawartość
605105	Mobilny stojak dentystyczny

EickSonic II skaler dentystyczny

- Rękojeść ze światłem LED (odłączana)
- Duża moc (28 kHz)
- Bezstopniowa regulacja mocy
- Wąż doprowadzający wodę ze złączem 3/8" do linii wodnej
- Bardzo łatwy w użyciu
- Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja
- Najlepszy stosunek jakości do ceny
- Włącznik z 5 końcówkami (2x płaska, szeroka; 2x płaska, szpic; 1x punktowa)

Numer art.

176865	EickSonic II skaler dentystyczny
176871	Końcówka wymienna do skatera G4T (Końcówka uniwersalna) <ul style="list-style-type: none"> • Płaska, szpiczasta
176872	Końcówka wymienna do skatera G2T (Końcówka uniwersalna) <ul style="list-style-type: none"> • Płaska, szeroka
176873	Końcówka wymienna do skatera G1T (Końcówka uniwersalna) <ul style="list-style-type: none"> • Płaska, szpiczasta
176874	Końcówka wymienna do skatera P1T (Końcówka stożkowa) <ul style="list-style-type: none"> • Stożkowa
E176865001	Skaler LED rękojeść (część zamienna)



176865

Urządzenie do usuwania kamienia nazębnego Cocoon Spray

Dzięki kompaktowej i wytrzymałej konstrukcji urządzenie do usuwania kamienia nazębnego Cocoon Spray nadaje się do większości rutynowych zabiegów stomatologicznych. Dzięki Scalerowi Piezo można łatwo usunąć nawet najtwardszy kamień nazębny. System chłodzenia wodą chroni niezawodnie również przed przegrzaniem.

- Jednostka sterująca: mikromotor, chłodzony zewnętrznym zasilaniem wodnym
- Moment obrotowy 1,6 Ncm, bezstopniowa regulacja do 40000 obr./min
- Suprason Piezo-Ultrasound-Skaler z oscylatorem tytanowym, częstotliwość 27-32 KHz, każdy z 1 końcówką roboczą nr 1 (płaska) i 10 P (okrągła)
- Regulacja ilości wody i mocy za pomocą pokręteł
- Komplet zawiera akcesoria, bez kątnicy
- Wymiary (w cm): dł. 23 x szer. 18 x wys. 10
- Waga: 3 kg

Numer art.

176860	Urządzenie do usuwania kamienia nazębnego Cocoon Spray
174038	Rękojeść dentystyczna (kątnica; RA) o niskiej prędkości Low Speed <ul style="list-style-type: none"> • Z chłodzeniem wodnym • Kompatybilne z 176860
176875	Przenośny zbiornik na wodę – plastik <ul style="list-style-type: none"> • Plastikowa konstrukcja • Ciśnienie robocze: do 3 bar • Pojemność: 5 litrów



176860



174038



174028



174026



174027



174026



174027



174105



174066



176782



174010



17401150



17401155

Wiertarka stomatologiczna EICKEMEYER® II z włącznikiem nożnym

- Kompaktowy mikrosilnik stomatologiczny dla rękojeści dentystycznych: prostnic i kątnic
- Mocny i wytrzymały, cicha praca
- Płynna regulacja prędkości do 35000 obr./min.
- Ruch zgodnie / przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
- Wybór przełącznika ręcznego lub nożnego
- Nie zawiera rękojeści

Numer art.

174028	Wiertarka stomatologiczna EICKEMEYER® II z włącznikiem nożnym
174026	Rękojeść dentystyczna (kątnica; RA) o niskiej prędkości Low Speed <ul style="list-style-type: none"> • 1:1, bez silnika pneumatycznego • Z systemem przytrzymywania przycisku • Kompatybilna z 174028, 176880
174027	Prosta rękojeść dentystyczna (HP) o niskiej prędkości (Low Speed)
E174025001	Micromotor do numer art. 174028 i 176880

Zestaw startowy dla małych zwierząt do wiertarki stomatologicznej EICKEMEYER® II i EickSonic PLUS

Numer art.

174002	Zestaw składający się z:
174026	Rękojeść dentystyczna (kątnica; RA) o niskiej prędkości Low Speed
174027	Prosta rękojeść dentystyczna (HP) o niskiej prędkości (Low Speed)
174105	Dentystyczny zestaw wiertel (RA) <ul style="list-style-type: none"> • 11-częściowy zestaw bazowy dla psów, kotów i małych zwierząt
174066	Plastikowe nasadki do polerowania z gumowym kielichem na pastę polerską <ul style="list-style-type: none"> • Do prostych rękojeści • Prędkość max. 3000 obr./min. • Do jednorazowego użytku • Opakowanie 100 szt.
176782	EICKEMEYER® Dentystyczna pasta do polerowania <ul style="list-style-type: none"> • Przeznaczona do polerowania zębów po usunięciu kamienia nazębnego • Smak miętowy • Zawartość: 200 g
174010	Spray do konserwacji instrumentów rotacyjnych <ul style="list-style-type: none"> • Uniwersalny spray do rękojeści, bez adaptera • Częste stosowanie zapewni rękojeści wydajność i trwałość • Nadaje się do rękojeści High & Low Speed • Zawartość: 500 ml
17401150	Adapter turbinowy <ul style="list-style-type: none"> • Do rękojeści
17401155	Dysza natryskowa „E“-Typ <ul style="list-style-type: none"> • Odpowiednie do numer art. 174010 • Do rękojeści Low Speed

Plastikowe nasadki do polerowania z gumowym kielichem polerskim

Optymalne polerowanie poprzez ruch oscylacyjny. To sprawia, że nadmierne ciepło zostanie odprowadzone – ząb nie ulegnie przegrzaniu.

- Do prostych rękojeści
- Prędkość max. 3000 obr./min.
- Do jednorazowego użytku
- Opakowanie 100 szt.

Numer art.

174066 Plastikowe nasadki do polerowania z gumowym kielichem na pastę polerską

**Kielichy polerujące (RA)**

- Opakowanie 5 sztuk

Numer art.

176787 Kielichy polerujące (RA)

**Przenośny zbiornik na wodę do jednostek dentystycznych**

Tworzy optymalne ciśnienie. Napełnić wodą destylowaną do ochrony skalera przed kamieniem.

- Ciśnienie robocze: do 3 bar
- Pojemność: 5 litrów

Numer art.

176875 Przenośny zbiornik na wodę – plastik

**Dentystyczna, plastikowa taca ociekowa z wymienną kratownicą**

- Zbiera wodę podczas usuwania kamienia nazębnego
- Czyste i wygodne położenie głowy na kratownicy
- Łatwa do czyszczenia i dezynfekcji
- Wymiary (w mm): dł. 390 x szer. 530 x wys. 45

Numer art.

177200 Dentystyczna, plastikowa taca ociekowa z wymienną kratownicą





Spray przeciw kurzowi

- Nadaje się do usuwania kurzu z rękojeści
- Bez freonów
- Zawiera głowicę natryskową

Numer art.	Zawartość
174880	Spray przeciw kurzowi 400 ml



174010



17401150



17401155

Spray do konserwacji instrumentów rotacyjnych

Uniwersalny spray do konserwacji prostnic i kątnic.

Numer art.	Zawartość
174010	Spray do konserwacji instrumentów rotacyjnych • Bez adaptera
17401150	Adapter turbinowy • Do rękojeści
17401155	Dysza natryskowa „E“-Typ • Odpowiednie do numer art. 174010 • Do rękojeści Lowspeed



EICKEMEYER® Dentystyczna pasta do polerowania

Dentystyczna pasta do polerowania, nadaje zębom połysk po usunięciu kamienia nazębnego.

- Przeznaczona do polerowania zębów po usunięciu kamienia nazębnego
- Smak miętowy

Numer art.	Zawartość
176782	EICKEMEYER® Dentystyczna pasta do polerowania 200 g



Szczotka czyszcząca do wiertel i frezów

Do czyszczenia wiertel i frezów dentystycznych

Numer art.
174908

Wiertła dentystyczne-zestaw SCHUMACHER

Numer art.	Liczba	Kształt
174106	Zestaw składający się z:	
17410601	2	okrągłe
	• Do prostej rękojeści	
17410609	5	okrągłe
	• Do turbiny	
17410603	5	szpiczaste, zaokrąglone
	• Dla kotów	
	• Do turbiny	
	• Rozmiar 10	
17410604	5	szpiczaste, zaokrąglone
	• Dla małych psów	
	• Do turbiny	
	• Rozmiar 12	
17410605	5	szpiczaste, zaokrąglone
	• Dla średnich i dużych psów	
	• Do turbiny	
	• Rozmiar 16	



17410601



17410609



17410603



17410604



17410605

Wiertło różyczkowe do turbiny

- Opakowanie 5 sztuk
- Do turbiny

Numer art.

17410608	Wiertło różyczkowe do turbiny ISO14
	• Maksymalna prędkość do 450000 obr./min
17410610	Wiertło różyczkowe do turbiny ISO18
	• Maksymalna prędkość do 450000 obr./min
17410609	Wiertło różyczkowe do turbiny ISO23
	• Maksymalna prędkość do 300000 obr./min



17410608

**Wiertło dentystyczne (FG)**

- Szpiczaste, zaokrąglone
- Opakowanie 5 sztuk

Numer art.

17410603	Wiertło dentystyczne (FG)
	• Dla kotów
	• Do turbiny
	• Rozmiar 10
17410604	Wiertło dentystyczne (FG)
	• Dla małych psów
	• Do turbiny
	• Rozmiar 12
17410605	Wiertło dentystyczne (FG)
	• Dla średnich i dużych psów
	• Do turbiny
	• Rozmiar 16



17410603

**Szpiczaste wiertło wykończeniowe (FG) do turbiny**

Konstrukcja z węgla wolframu zapewnia długą żywotność.

- Do turbiny
- Opakowanie 2 sztuki
- Długość: 6 mm

Numer art.

174209	Szpiczaste wiertło wykończeniowe (FG)
--------	---------------------------------------





174105



176787

Dentystyczny zestaw wiertel (RA)

Numer art.

174105 Dentystyczny zestaw wiertel (RA)
 • 11-częściowy zestaw bazowy dla psów, kotów i małych zwierząt

Pasujący do:

- Rękojeść dentystyczna Low Speed – Contra angle (RA) z systemem przytrzymywania przycisku (numer. art. 174026)
- Rękojeść Low Speed z 1:1 wewnętrznym chłodzeniem wodnym (numer. art. 17402205)

176787 Kielichy polerujące (RA)

- Opakowanie 5 sztuk



Zestaw wiertel dentystycznych (HP) do prostej rękojeści

Zawiera:

- Okrągłe wiertło, rozmiar 18
- Płaskie, szpiczaste wiertło, rozmiar 14 i 23
- Wiertło odwrócony stożek, rozmiar 12 i 21

Numer art.

174205 Zestaw wiertel dentystycznych (HP)
 • Do prostej rękojeści

Wiertło dentystyczne (HP) do prostej rękojeści

- Okrągłe
- Do prostej rękojeści
- Opakowanie 2 sztuki

Numer art.

17410601 Wiertło dentystyczne (HP) ISO23



Zestaw wiertel dentystycznych dla gryzoni (HP) do prostej rękojeści

Wyjątkowo długi wał wiertła umożliwia osiągnięcie nawet do tylnych zębów trzonowych.

- Do prostych rękojeści
- Bardzo długi trzonek
- Opakowanie 5 sztuk

Numer art.		Długość mm
177280	Zestaw wiertel dentystycznych dla gryzoni (HP)	65

**Zestaw wiertel do prostej rękojeści**

- Do prostej rękojeści
- Extra długie

Numer art.		Długość mm
174103	Zestaw wiertel do HST	44,5

**Dentystyczny wałek diamentowy dla gryzoni (HP) do prostej rękojeści**

Wałek diamentowy jest znacznie dłuższy niż porównywalne produkty powlekane, co zwiększa znacznie jego trwałość.

- Do prostej rękojeści
- Wyprodukowany w Niemczech
- Kompatybilny z osłoną wiertła dentystycznego dla gryzoni (HP) (numer. art. 177282)

Numer art.	
174107	Dentystyczny wałek diamentowy dla gryzoni (HP)

**Ośłona wiertła dentystycznego dla gryzoni (HP) do prostej rękojeści**

Zabezpiecza pacjenta przed skaleczeniem przez wiertło.

- Tylko dla prostej rękojeści
- Do użytku z zestawami wiertel dentystycznych (numer. art. 177280) i dentystycznym diamentowym wałkiem (numer. art. 174107)

Numer art.	
177282	Ośłona wiertła dentystycznego dla gryzoni (HP)





17734007



Frezy dentystyczne do przycinania zębów gryzoni (HP)

Numer art.		Długość mm
17734006	Frez dentystyczny <ul style="list-style-type: none"> • Do prostej rękojeści • Precyzyjny, czerwony pierścień 	45
17734007	Frez dentystyczny <ul style="list-style-type: none"> • Do prostej rękojeści • Średni, niebieski pierścień 	50
17734008	Frez dentystyczny <ul style="list-style-type: none"> • Do prostej rękojeści • Duży, zielony pierścień 	50



174455



Diamantowa tarcza do cięcia SUPERFLEX

Do oddzielania zębów wielokorzeniowych, skracania zębów, fenestracji skorupy żółwia.
Zawsze używaj osłony twarzy podczas korzystania z obracających się instrumentów.

- Elastyczna
- Wyprodukowana w Niemczech

Numer art.		Ø mm	Długość mm
174455	Diamantowa tarcza do cięcia SUPERFLEX <ul style="list-style-type: none"> • Do prostej rękojeści • Grubość 0,18 mm • Specjalnie dla gryzoni 	13,0	45
174450	Diamantowa tarcza do cięcia SUPERFLEX <ul style="list-style-type: none"> • Do prostej rękojeści 	21,0	45



Osłona na tarczę diamentową do prostej rękojeści

Ochrona błon śluzowych przed niepożądanym krwawieniem po uszkodzeniu tarczą.

- Do nasadzenia na prostą rękojeść
- Dostawa bez rękojeści

Numer art.	
177284	Osłona na tarczę diamentową



Jednorazowa zakrzywiona szpatułka

- Zakrzywiona pod kątem 90°
- Opakowanie 10 sztuk

Numer art.		Długość mm
17734005	Jednorazowa zakrzywiona szpatułka	100

Rozwieracz dla gryzoni

- Istotna pomoc dentystryczna podczas badania jamy ustnej królików i innych gryzoni
- Pomocny w przeglądaniu jamy ustnej i przypadku zaciskania zębów trzonowych

Numer art.		Długość mm
177303	Rozwieracz dla gryzoni <ul style="list-style-type: none"> • Lekki model SCHMIDTKE • Dla szynszyli 	115
177304	Rozwieracz dla gryzoni <ul style="list-style-type: none"> • Nadaje się do średnich i dużych ras królików • Solidny 	110



177303

177304

Rozwieracz dla królików

- Istotna pomoc dentystryczna podczas badania jamy ustnej królików, pozwala lekarzowi weterynarii mieć obie ręce wolne
- Model z zapadkowym mechanizmem blokującym
- Łatwy w użyciu jedną ręką
- Szybkie otwieranie i zamykanie
- Solidny model
- Z mechanizmem blokującym
- Dla karłowatych królików i świnek morskich


Numer art.		Długość mm
177330	Rozwieracz dla królików	110

**Stojak do leczenia zębów dla gryzoni**

Znieczulone zwierzę może być optymalnie zamocowane, aby uzyskać jak najlepszy dostęp do jamy ustnej. Wysokość i nachylenie stołu roboczego są indywidualnie regulowane w celu uzyskania optymalnej pozycji roboczej. Otwieracz do ust można bezstopniowo regulować.

- Długość stołu roboczego: 28 cm
- Szerokość między rozpórkami: 13,5 cm
- Wysokość: 29 cm

Numer art.	
177324	Stojak do leczenia zębów dla gryzoni

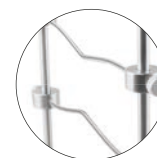



177302

177305

177306



177310

177311


177320

Rozwieracz policzkowy dla gryzoni

Numer art.		Długość mm
177302	Rozwieracz policzkowy • Z ażurowymi szczękami • Dł./szer. szczęk 16/13 mm	62
177305	Rozwieracz policzkowy • Dla królików średnich i dużych • Dł./szer. szczęk 21/15 mm	85
177306	Rozwieracz policzkowy • Dla królików karłowatych • Dł./szer. szczęk 14/11 mm	58
177310	Rozwieracz policzkowy • Z długimi szczękami • Dł./szer. szczęk 35/10 mm	58
177311	Rozwieracz policzkowy • Dla świnek morskich i szynszyli • Długość szczęk: 21 mm • Szer. szczęk tył/przód: 9/4 mm	60
177320	Rozwieracz policzkowy (bardzo mały) • Dla małych zwierząt domowych • Dł./szer. szczęk 11/9 mm	35

Szpatuła językowa dla gryzoni

Numer art.		Długość mm
177307	Szpatuła językowa • Prosta • Płaska	175
177308	HOLLMANN Szpatuła językowa • Mała • Wklęsła • Optymalne przytrzymanie języka poprzez rowkowany kształt	170
177309	HOLLMANN Szpatuła językowa • Duża • Wklęsła • Optymalne przytrzymanie języka poprzez rowkowany kształt	190
174825	HEIDEMANN Szpatuła językowa • Do ekstrakcji zębów u gryzoni	170

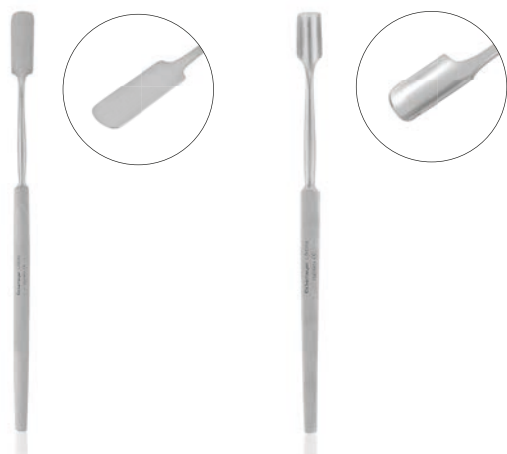


177307

177308

MINI-FRIEDMANN Odgryzacz kostny dla gryzoni

Numer art.		Długość mm
177314	MINI-FRIEDMANN Odgryzacz kostny • Dla bardzo małych szczęk	140
177312	MINI-FRIEDMANN Odgryzacz kostny • Bardzo wąskie	120

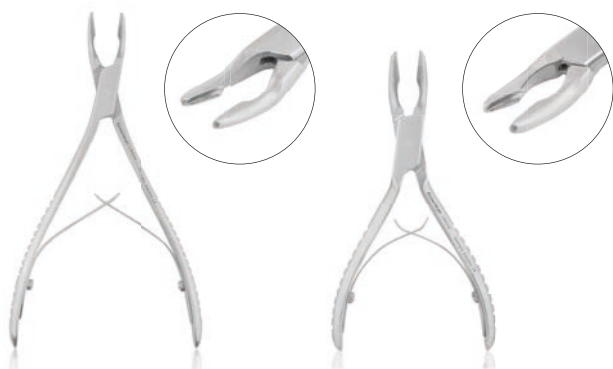

177314

177312

Obcęgi i tarniki dla gryzoni

Numer art.		Długość mm
177316	Obcęgi wolframowe do zębów trzonowych gryzoni Łatwa obsługa: Przy niewielkim wysiłku fizycznym można przyciąć zęby i wygładzić za pomocą tarnika. <ul style="list-style-type: none"> • Podwójny mechanizm sprężynowy • Wysoka stabilność • Łatwe przycinanie zębów trzonowych 	170
177318	Tarnik dentystyczny <ul style="list-style-type: none"> • Precyzyjny 	180
177319	Tarnik dentystyczny <ul style="list-style-type: none"> • Precyzyjny • Diamentowa powłoka 	180



177316



177318

Obcęgi do zębów gryzoni

Pomagają usunąć ostrogi i haki na zębach trzonowych, jednocześnie umożliwiając wizualizację powierzchni żujących. Do obcinania zębów gryzoni.

Numer art.		Długość mm
177315	Obcęgi <ul style="list-style-type: none"> • Dla królików i świnek morskich 	180
177317	Obcęgi <ul style="list-style-type: none"> • Dla szynszyli 	120



177315

Luksatory Crossley dla gryzoni

Numer art.		Długość mm
177322	Luksator do dolnych siekaczy <ul style="list-style-type: none"> • Dla zwierząt domowych • Do ekstrakcji zębów (siekaczy) 	195
177323	Luksator do górnych siekaczy <ul style="list-style-type: none"> • Dla zwierząt domowych • Do ekstrakcji zębów (siekaczy) 	190
17734003	Luksator Crossley do siekaczy u królików <ul style="list-style-type: none"> • Dla królików 	190
17734004	Luksator Crossley do zębów trzonowych u królików <ul style="list-style-type: none"> • Dla królików 	170



177322



17734004



17734003



17734004



17734012



17734001



17734006



17734007



17734008



174455



177311



177310



177305



177306



171411



177340005

Kleszcyki ekstrakcyjne dla królików

Szczęki kleszczy są zgięte o 100°, ułatwia to wyciągnięcie zębów trzonowych i przedtrzonowych.

Numer art.		Długość mm
17734001	Kleszcyki ekstrakcyjne dla królików	160

Zestaw dentystyczny dla królików

Zestaw startowy, specjalnie zaprojektowany do diagnozowania i leczenia chorób zębów u królików – dr SCHUMACHER.

Numer art.		Długość mm
177340	Zestaw składający się z:	
17734003	Luksator Crossley do siekaczy	190
17734004	Luksator Crossley do zębów trzonowych	170
17734012	Sonda dentystyczna Fig. CP10	155
17734001	Kleszcyki ekstrakcyjne	160
17734006	Frez dentystyczny <ul style="list-style-type: none"> Precyzyjny Czerwony pierścień 	45
17734007	Frez dentystyczny <ul style="list-style-type: none"> Średni Niebieski pierścień 	50
17734008	Frez dentystyczny <ul style="list-style-type: none"> Duży Zielony pierścień 	50
174455	Diamentowa tarcza do cięcia SUPERFLEX <ul style="list-style-type: none"> Grubość 0,18 mm Specjalnie dla gryzoni Elastyczny Wysoka jakość, wyprodukowano w Niemczech Ø 13 mm 	45
177311	Rozwieracz policzkowy <ul style="list-style-type: none"> Dla świnek morskich i szynszyli Długość szczęk: 21 mm Szerokość szczęk z przodu: 4 mm Szerokość szczęk z tyłu: 9 mm 	60
177310	Rozwieracz policzkowy <ul style="list-style-type: none"> Z długimi szczękami Długość szczęk: 35 mm Szerokość szczęk: 10 mm 	58
177305	Rozwieracz policzkowy <ul style="list-style-type: none"> Dla królików średnich i dużych Długość szczęk: 21 mm Szerokość szczęk: 15 mm 	85
177306	Rozwieracz policzkowy <ul style="list-style-type: none"> Dla królików karłowatych Długość szczęk: 14 mm Szerokość szczęk: 11 mm 	58
171411	Ustalacz GRÄFE <ul style="list-style-type: none"> Ze sztyftem 	110
177340005	Jednorazowa zakrzywiona (kąt 90) szpatałka (10 szt.)	100

Zestaw dentystyczny dla gryzoni z instrumentami obrotowymi

Ten zestaw dentystyczny dla gryzoni wraz ze swoimi instrumentami obrotowymi pomaga w bezpiecznym skracaniu zębów gryzoni.

Numer art.		Długość mm
177341	Zestaw składający się z:	
177305	Rozwieracz policzkowy <ul style="list-style-type: none"> Dla królików średnich i dużych Długość szczęk: 21 mm Szerokość szczęk: 15 mm 	85
177306	Rozwieracz policzkowy <ul style="list-style-type: none"> Dla królików karłowatych Długość szczęk: 14 mm Szerokość szczęk: 11 mm 	58
177310	Rozwieracz policzkowy <ul style="list-style-type: none"> Z długimi szczękami Długość szczęk: 35 mm Szerokość szczęk: 10 mm 	58
17734001	Kleszczyki ekstrakcyjne	160
17734003	Luksator Crossley do siekaczy	190
17734004	Luksator Crossley do zębów trzonowych	170
177304	Rozwieracz dla gryzoni <ul style="list-style-type: none"> Nadaje się do średnich i dużych ras królików Solidny 	110
17734012	Sonda dentystyczna Fig. CP10	155
17734007	Frez dentystyczny <ul style="list-style-type: none"> Średni, niebieski pierścień 	50
17734008	Frez dentystyczny <ul style="list-style-type: none"> Duży, zielony pierścień 	50
177280	Zestaw wiertel dentystycznych dla gryzoni (HP) <ul style="list-style-type: none"> Do prostych rękojeści Bardzo długi trzonek 	65
177282	Ostona wiertła dentystycznego dla gryzoni (HP) <ul style="list-style-type: none"> Do montażu na prostej rękojeści Zabezpiecza pacjenta przed skałeczeniem przez wiertło Tylko dla prostej rękojeści 	
174450	Diaментowa tarcza do cięcia SUPERFLEX do rękojeści <ul style="list-style-type: none"> Ø 21 mm, elastyczna Wyprodukowana w Niemczech 	45
177284	Ostona na tarczę diamentową <ul style="list-style-type: none"> Do nasadzenia na prostą rękojeść 	
177307	Szpatuła językowa <ul style="list-style-type: none"> Prosta, płaska 	175
177308	HOLLMANN Szpatuła językowa <ul style="list-style-type: none"> Mała, wklęsła Optymalne przytrzymanie języka poprzez rowkowany kształt 	170
177309	HOLLMANN Szpatuła językowa <ul style="list-style-type: none"> Duża, wklęsła Optymalne przytrzymanie języka poprzez rowkowany kształt 	190
517050	Pojemnik na instrumenty – Premium <ul style="list-style-type: none"> Z perforowaną podstawą i pokrywą Nie nadaje się do autoklawu Wymiary (w cm): dł. 30 x szer. 14 x wys. 7 	



177305



177306



177310



17734001



17734003



17734004



177304



17734012



17734007



17734008



177280



177282



174450



177284



177307



177308



177309



517050



175323



175803

Dźwignie stomatologiczne

Te wyjątkowo wąskie dźwignie stomatologiczne zostały specjalnie opracowane do ekstrakcji zębów u kotów i małych psów. Są pomocne przy usuwaniu złamanych korzeni zębów. Ostrzenie końcówki dźwigni jest możliwe za pomocą szlifierki.

Numer art.		Szerokość mm	Długość mm
175322	Dźwignia stomatologiczna • Z prostą końcówką	1	135
175323	Dźwignia stomatologiczna • Z prostą końcówką	2	135
175803	Mały podnośnik • Dla kotów	2	170



176414



175324

Dłuto / dźwignia

Numer art.		Długość mm
176414	Dźwignia – okostna, standardowy uchwyt • Optymalnie leży w dłoni, lepsze prowadzenie instrumentów niż podwójne windy • Zaprojektowany do ekstrakcji Canini • Nieznaczne oddzielenie włókien przyzębia szyjnego	150
175324	Dłuto, podwójnie zakończone • Ostra, spiczasta i wąska strona służy do podnoszenia kłapek dziąsłowych u kotów i małych psów • Drugi koniec jest zaokrąglony i minimalizuje ryzyko poślizgnięcia się • Oba końce są lekko zgięte	190
176415	Dźwignia – okostna, podwójnie zakończona • Drobne, okrągłe robocze końce mają kształt talerza o średnicy 4 mm i 6 mm i mają funkcję cięcia i obierania w celu oddzielenia włókien przyzębia	205



175312



175313

Dźwignie skrzydełkowe


Zaprojektowany z ostrym ostrzem i bocznymi skrzydełkami, co poprawia kontakt z korzeniami stożkowymi.

Numer art.		Szerokość mm	Długość mm
175312	Dźwignie skrzydełkowe	2	145
175313	Dźwignie skrzydełkowe	3	145
175314	Dźwignie skrzydełkowe	4	145
175315	Dźwignie skrzydełkowe	5	145
175316	Dźwignie skrzydełkowe	6	145

DENTANOMIC Narzędzia stomatologiczne

Instrumenty dentystyczne DENTANOMIC to innowacja w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Znacznie upraszczają ekstrakcję zęba. Dzięki wymiennym ostrzom, instrumenty można szybko i łatwo dostosować do odpowiednich warunków pracy. Ergonomicznie ukształtowane uchwyty są łatwe do trzymania i umożliwiają bezpieczne prowadzenie instrumentów. Bardzo lekkie uchwyty wykonane z wysokiej jakości aluminium dostępne są w 5 kolorach: niebieskim, zielonym, różowym, pomarańczowym i fioletowym. Ostrza są specjalnie hartowane i mają specjalny i bardzo ostry krój, który przecina sztywne włókna przyzębia i poszerza przestrzeń przyzębia.

Numer art.		Długość mm	Szerokość mm
175000	DENTANOMIC uchwyt • Niebieski	65	
175001	DENTANOMIC uchwyt • Zielony	65	
175002	DENTANOMIC uchwyt • Różowy	65	
175008	DENTANOMIC uchwyt • Pomarańczowy	65	
175009	DENTANOMIC uchwyt • Fioletowy	65	
175005	DENTANOMIC uchwyt • Dłuższy uchwyt • Niebieski	80	
175006	DENTANOMIC uchwyt • Dłuższy uchwyt • Zielony	80	
175007	DENTANOMIC uchwyt • Dłuższy uchwyt • Różowy	80	
175003	DENTANOMIC uchwyt • Dłuższy uchwyt • Pomarańczowy	80	
175004	DENTANOMIC uchwyt • Dłuższy uchwyt • Fioletowy	80	
175100	DENTANOMIC skrzydlata końcówka dźwigni		2
175101	DENTANOMIC skrzydlata końcówka dźwigni		3
175102	DENTANOMIC skrzydlata końcówka dźwigni		4
175103	DENTANOMIC skrzydlata końcówka dźwigni		5
175104	DENTANOMIC luxator		1,5
175105	DENTANOMIC luxator		2
175106	DENTANOMIC luxator		3
175107	DENTANOMIC luxator		4
175108	DENTANOMIC luxator		5
175200	Stojak do przechowywania i sterylizacji • Dla wszystkich końcówek DENTANOMIC • Z pokrywką • Wymiary (w cm): dł. 19 x szer. 8 x wys. 2		
175201	Zestaw do szlifowania ostrzy DENTANOMIC		
175202	DENTANOMIC pojemnik do sterylizacji • Do 5 uchwytów • Z wyjmowaną tacą		
E17500001	Zapasy klucz do uchwytów		

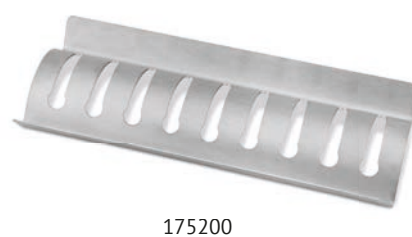



175319



Luksatory

Luksatory EICKEMEYER® doskonale nadają się do przecinania włókien przyzębia szyjnego i poszerzania przestrzeni przyzębia. Wprowadza się je równoległe do osi podłużnej zęba, który ma zostać usunięty, oscylując pomiędzy kością a korzeniem zęba (bez wysiłku). Rezultatem jest rozszerzenie gniazda, dzięki czemu ząb można łatwo wyjąć. Szeroki i krótki uchwyt pozwala na wygodną pracę.

Numer art.	Szerokość mm	Długość mm
175317 Luksator	1	125
175318 Luksator	2	125
175319 Luksator	3	125
175320 Luksator	4	125
175321 Luksator	5	125



Luksator SCHUMACHER

- Luksator do usuwania resztek korzeni u kotów

Numer art.	
175309	Luksator



Luksator Racifein

- Zmodyfikowany
- Prosty

Numer art.	Długość mm
175405 Luksator Racifein	145



Dźwignia stomatologiczna BEIN

Idealne do łagodnej ekstrakcji zęba. Kształt łyżeczki tej dźwigni pomaga wprowadzić je do kieszeni przyzębia, co zapewnia dodatkową dźwignię i zmniejsza uszkodzenia dziąseł.

Numer art.		Szerokość mm	Długość mm
175302	Dźwignia stomatologiczna BEIN	2	135
175303	Dźwignia stomatologiczna BEIN	3	135
175304	Dźwignia stomatologiczna BEIN	4	135
17530801	Dźwignia stomatologiczna BEIN	5	135



175302

Ekstraktory do zębów SCHUMACHER

Kształt łyżeczki tej dźwigni pomaga wprowadzić je do kieszeni przyzębia, co zapewnia dodatkową dźwignię i zmniejsza uszkodzenia dziąseł.

Numer art.		Szerokość mm	Długość mm
175305	Ekstraktory do zębów SCHUMACHER • Rozmiar 1	2	135
175306	Ekstraktory do zębów SCHUMACHER • Rozmiar 2	3	135
175307	Ekstraktory do zębów SCHUMACHER • Rozmiar 3	4	135
175308	Ekstraktory do zębów SCHUMACHER • Rozmiar 4	5	135




175308

Sondy dentystyczne

Kanał korzeniowy można łatwo pogłębić, przeciąć głębiej a ząb łatwiej rozruszać.

Numer art.		Długość mm
17734011	Sondy dentystyczne • Podwójna końcówka	170
17734012	Sonda dentystyczna • Fig. CP10	155
17647202	Sonda dentystyczna	160
176456	Dentystyczna sonda pomiarowa • Pomaga określić głębokość kieszeni • Stopniowana końcówka	160
176459	Sonda dentystyczna • Fig. 9 • Przy próchnicy, kamieniu nazębnym, głębokich kieszeniach	155
176467	Sonda dentystyczna • Fig. 17 – idealna dla kotów • Przy próchnicy, kamieniu nazębnym, głębokich kieszeniach	170

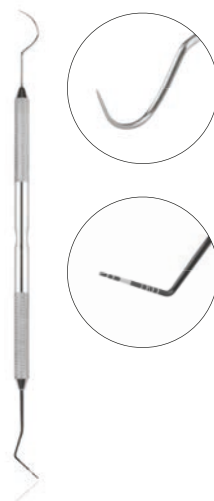

17734011



17647202




176410

176412

176422

Instrumenty dentystyczne dla małych zwierząt

Numer art.		Długość mm
176410	Skaler naddziąstowy JAQUETTE • Prawy wygięty dwustronny	165
176412	Skaler skrobak poddziąstwy • Prawy wygięty dwustronny	165
176422	Lusterko stomatologiczne z uchwytem • Ø lustra: 22 mm	165

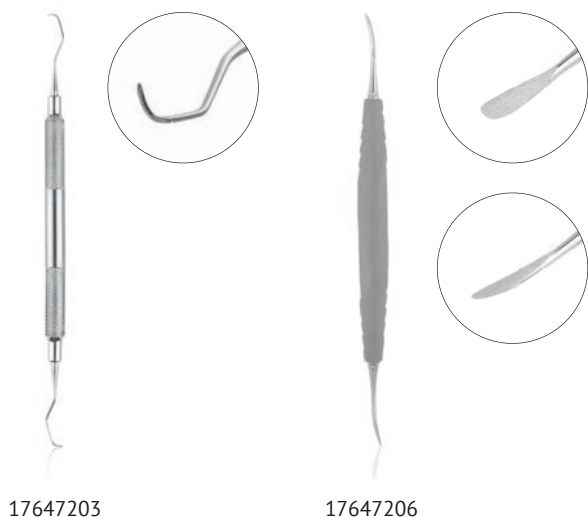

17647203

17647206

Skaler skrobak poddziąstwy/Raspatories

Numer art.		Długość mm
17647203	Skaler skrobak poddziąstwy • GRA 3/4"	170
17647204	Skaler skrobak poddziąstwy • GRA 9/10"	170
17647206	Raspator • Podwójna • Dla kotów	170
17647207	Raspator • Podwójna • Dla psów	175
166014	WILLIGER Raspator • Dla średnich/dużych psów • Zaokrąglona część funkcjonalna • Ostro zastrzony • Szeroki, rowkowany uchwyt dla bezpiecznego manipulowania narzędziem • Wygięte • Szerokość: 5 mm	130
166016	WILLIGER Raspator • Dla dużych psów • Zaokrąglona część funkcjonalna • Ostro zastrzony • Szeroki, rowkowany uchwyt dla bezpiecznego manipulowania narzędziem • Wygięte • Szerokość: 6 mm	160

Raspator

- Cienki
- Podwójnie zakończony

Numer art.		Długość mm
176413	Raspator	180

Ekstraktor do zębów FAHRENKRUG			
Numer art.		Szerokość mm	Długość mm
175801	Ekstraktor do zębów FAHRENKRUG • Rozmiar 1 • Dla psów	2	200
175802	Ekstraktor do zębów FAHRENKRUG • Rozmiar 2 • Dla kotów i psów	3	190



175801

Minnesota Retraktor		
Retraktor został specjalnie opracowany dla medycyny weterynaryjnej, ma wiele zalet. Chroni błony śluzowe podczas pracy z turbiną, utrzymuje język i usta z dala i może być używany uniwersalnie.		
Numer art.		Długość mm
176022	Minnesota Retraktor	155



Kamień szlifierski Arkansas			
<ul style="list-style-type: none"> • Nadaje się do ostrzenia dźwigni dentystycznych • Używać oleju jako smaru, aby zapobiec zatykaniu się porów kamienia • Fazowany kształt (wysokość 2,7 mm lub 6,3 mm) 			
Numer art.		Szerokość cm	Długość cm
176480	Kamień szlifierski Arkansas	5,1	5,1



Kleszcze dentystyczne dla psów i kotów			
<ul style="list-style-type: none"> • Dostosowany do kształtu zębów u zwierząt • W stanie otwartym szczęki są równoległe do siebie, zapewnia to lepszą przyczepność 			
Numer art.		Długość mm	Kształt
176010	Kleszcze dentystyczne dla małych psów i kotów • Diamentowe szczęki dla optymalnego przytrzymania zęba	110	
176011	Kleszcze dentystyczne dla małych psów i kotów • Nowy model	110	prosty
176016	Kleszcze dentystyczne dla psów • Nowy model	165	prosty
176015	Kleszcze dentystyczne dla psów • Diamentowe szczęki dla optymalnego przytrzymania zęba	165	
176017	Kleszcze dentystyczne dla psów	165	prosty



176010



WITZEL Kleszcze dentystyczne do korzeni

• Fig. 166

Numer art.		Długość mm
176215	WITZEL Kleszcze dentystyczne do korzeni	150



STIEGLITZ Kleszcze do ekstrakcji korzeni

Numer art.		Długość mm
176020	STIEGLITZ Kleszcze do ekstrakcji korzeni	130



Kleszcze do cięcia korzeni zębowych

Numer art.		Długość mm
176024	Kleszcze do cięcia korzeni zębowych	150

Kleszcze ekstrakcyjne

Łatwe usuwanie końcówek korzeni zębów. Smukłe, lekko zakrzywione końce z ząbkowaniem krawędzi umożliwiają łatwe wyciąganie. Szczypce otwierają się automatycznie dzięki sprężynie i są ergonomicznie zoptymalizowane dzięki zakrzywionemu kształtowi.

Numer art.		Długość mm
176023	Kleszcze ekstrakcyjne	150

**Kleszcze ekstrakcyjne skośne**

Ukośne rogi umożliwiają optymalny dostęp, a szczęki nie mają kontaktu po zamknięciu. Minimalizuje to ryzyko pęknięć.

Specjalnie do ekstrakcji zębów mlecznych u kotów i małych psów. Automatyczne sprężynowe otwieranie.

- Dla kotów i małych psów


Numer art.		Długość mm
176025	Kleszcze ekstrakcyjne skośne	125

**LaGrange Nożyczki dziąsłowe**

- W kształcie litery S – dla ergonomicznego cięcia

Numer art.		Długość mm
115100	LaGrange Nożyczki dziąsłowe	115



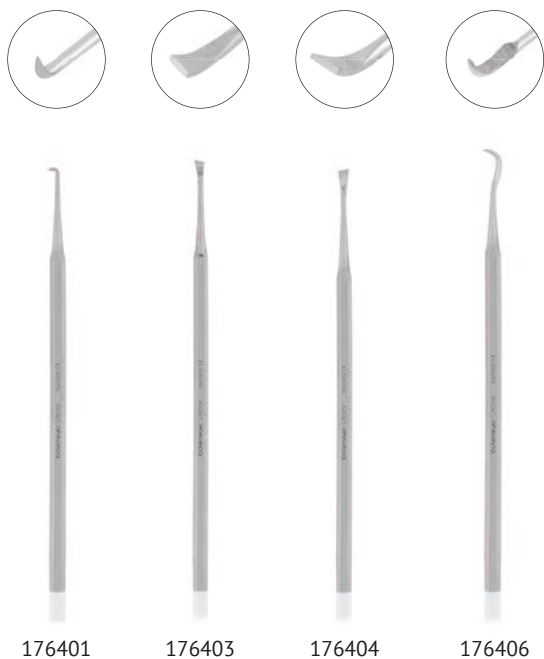

Ręczne skalery dentystyczne dla małych zwierząt

- Pomocne w usunięciu kamienia nazębnego
- Stabilna forma

Numer art.		Długość mm
176401	Ręczny skaler dentystyczny • Hak	150
176402	Ręczny skaler dentystyczny • Z dłutem	150
176403	Ręczny skaler dentystyczny • Lewy	155
176404	Ręczny skaler dentystyczny • Prawy	145
176405	Ręczny skaler dentystyczny • „Dziób jastrzębia” • Szpic	150
176406	Ręczny skaler dentystyczny • „Dziób jastrzębia” • Szpic • Solidny	150



Mały zestaw dentystyczny dla kotów

Mały zestaw dentystyczny dla kotów MIHALJEVIC.

Numer art.		Długość mm	Kształt
176471	Zestaw składający się z:		
134009	FEILCHENFELD Pinceta odłatkowa • 1 x 2 zębów	90	
110609	Nożyczki Iris • Ostre/ostre	90	prosty
176413	Raspator	180	cienki
175405	Luksator Racifein • Zmodyfikowany	145	prosty
175312	Dźwignia skrzydełkowa • Szerokość: 2 mm	145	
175302	Dźwignia stomatologiczna BEIN • Szerokość: 2 mm	135	



Duży zestaw dentystyczny dla kotów

Zestaw specjalnie zaprojektowany do diagnozowania i leczenia chorób zębów u kotów MIHALJEVIĆ.

Numer art.		Długość mm	Kształt
176470	Zestaw składający się z:		
176020	STIEGLITZ Kleszcze do ekstrakcji korzeni	130	
175405	Luksator Racifein • Zmodyfikowany	145	prosty
175803	Mały podnośnik dla kotów	170	
176413	Raspator	180	cienki
17734011	Sonda dentystyczna podwójna	170	
176215	WITZEL Kleszcze dentystyczne do korzeni	150	
175312	Dźwignia skrzydełkowa • Szerokość: 2 mm	145	
175302	Dźwignia stomatologiczna BEIN • Szerokość: 2 mm	135	
110609	Nożyczki Iris • Ostre/ostre	90	prosty
124009	SPENCER Nożyczki do szwów	90	
176011	Kleszcze dentystyczne dla małych psów i kotów	110	prosty
134009	FEILCHENFELD Pinceta odłamkowa • 1 x 2 zębów	90	



176020 175405 175803 176413



17734011 176215 175312 175302




110609 124009 176011 134009


Zestaw dentystyczny dla psów i kotów

Zestaw startowy dla diagnostyki i chirurgii stomatologicznej przyzębia u psów i kotów SCHUMACHER.

Numer art.		Długość mm
176472	Zestaw składający się z:	
17647206	Raspator (podwójny) do okostnej dla kotów	170
17647207	Raspator (podwójny) do okostnej dla psów	175
17647204	Skaler skrobak podziąstowy GRA 9/10"	170
17647203	Skaler skrobak podziąstowy GRA 3/4"	170
17647202	Sonda dentystyczna	160
17647205	MAYO Nożyczki (proste)	145
132912	Pinceta ADSON-BROWN	120
972016	Anatomiczna pinceta ECONOMY	160
170710	Iris Pinceta GRÄFE	100
17734011	Sonda dentystyczna podwójna	170
152414	Igłotrzymacz MATHIEU-OLSEN z wkładką TC	140
100503	Gryf skalpela STANDARD Nr. 3 • Mały, ostrza 10 do 15	125
98100711	Ostrze skalpela STANDARD Fig. 11	

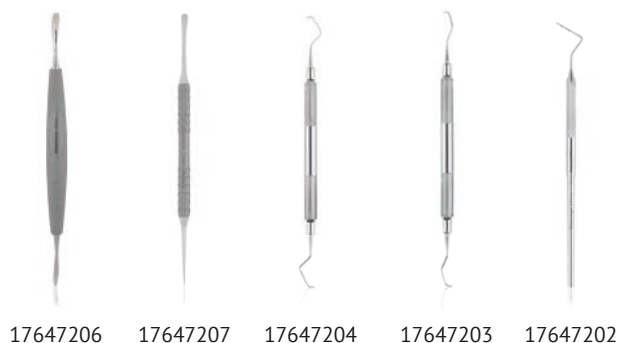

17647206 17647207 17647204 17647203 17647202

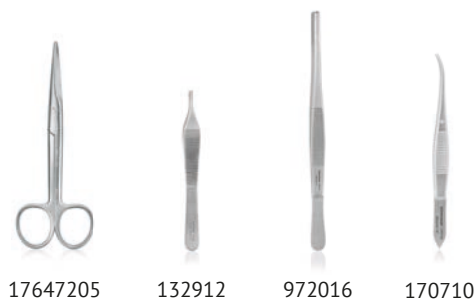

17647205 132912 972016 170710



17734011 152414 100503 98100711



175405



175312



175305



175306



175307



175801



175802



17734011



17647203



17647204



176020



176011



20012005



20012004



20012003



20012002



20012001



517050

Zestaw dentystyczny dla psów i kotów, duży

Numer art.		Długość mm	Kształt
177371	Zestaw składający się z:		
175405	Luksator Racifein	145	prosty
175312	Dźwignia skrzydełkowa • Szerokość: 2 mm	145	
175305	Ekstraktor do zębów SCHUMACHER • Rozmiar 1 • Szerokość: 2 mm	135	prosty
175306	Ekstraktor do zębów SCHUMACHER • Rozmiar 2 • Szerokość: 3 mm	135	prosty
175307	Ekstraktor do zębów SCHUMACHER • Rozmiar 3 • Szerokość: 4 mm	135	prosty
175801	Ekstraktor do zębów FAHRENKRUG • Rozmiar 1 • Dla psów • Szerokość: 2 mm	200	
175802	Ekstraktor do zębów FAHRENKRUG • Rozmiar 2 • Dla kotów i psów • Szerokość: 3 mm	190	
17734011	Sonda dentystyczna podwójna • Podwójna końcówka	170	
17647203	Skaler skrobak pod- dziąstwy GRA 3/4"	170	
17647204	Skaler skrobak poddziąstwy GRA 9/10"	170	
176020	Kleszcze do ekstrakcji korzeni STIEGLITZ	130	
176011	Kleszcze dentystyczne dla małych psów i kotów	110	prosty
20012005	Rozwieracz EICKEMEYER® • Rozmiar XS • 3–4 cm		
20012004	Rozwieracz EICKEMEYER® • Rozmiar S • 4–6 cm		
20012003	Rozwieracz EICKEMEYER® • Rozmiar M • 6–8 cm		
20012002	Rozwieracz EICKEMEYER® • Rozmiar L • 9–11,5 cm		
20012001	Rozwieracz EICKEMEYER® • Rozmiar XL • 12–15 cm		
517050	Pojemnik na instrumenty – Premium • Nie nadaje się do autoklawu • Wymiary (w cm): dł. 30 x szer. 14 x wys. 7		

Zestaw rozwieraczy EICKEMEYER®


Zwycięzca nagrody „Cat Friendly Award“!
Z rozwieraczami EICKEMEYER® mogą być przeprowadzone różne zabiegi dentystyczne u psów, kotów i małych zwierząt.

Nowe rozwieracze EICKEMEYER® składają się z dwóch cylindrów, które można regulować za pomocą gwintu w ich długości. Z tą funkcją rozwieracze mogą być łatwo dostosowane do jamy ustnej pacjenta. Dzięki określonej regulacji „nie przesadzimy” i nie spowodujemy uszkodzeń.

- Do sterylizacji w autoklawie
- Przezierny dla RTG
- Materiał: Twardy plastik

Numer art.

200120	Zestaw rozwieraczy EICKEMEYER® Zestaw składający się z
20012005	Rozwieracz EICKEMEYER® • Rozmiar XS • 3–4 cm
20012004	Rozwieracz EICKEMEYER® • Rozmiar S • 4–6 cm
20012003	Rozwieracz EICKEMEYER® • Rozmiar M • 6–8 cm
20012002	Rozwieracz EICKEMEYER® • Rozmiar L • 9–11,5 cm
20012001	Rozwieracz EICKEMEYER® • Rozmiar XL • 12–15 cm

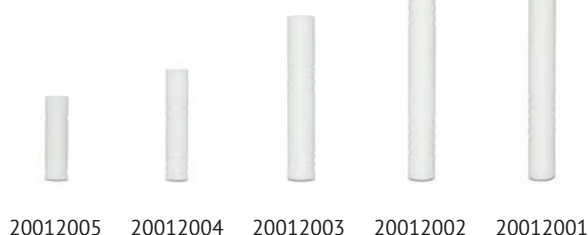**Rozwieracze z drewna**

Drewno sprawia, że ten rozwieracz jest wyjątkowo lekki i umożliwia bezpieczny dostęp do jamy ustnej.

Numer art.		Długość mm
200007	Rozwieracz z drewna • Mały	70
200009	Rozwieracz z drewna • Duży	90



200007



200009

Model zębów

- Transparentna szczeka na zawiasach, pomaga zwizualizować korzenie wszystkich zębów (siekacze, kły, zęby przedtrzonowe, trzonowe)
- Szczęki mogą zostać rozdzielone dla lepszej wizualizacji zębów
- Idealne do edukacji klienta

Numer art.

174092	Model zębów – kot
174093	Model zębów – pies
174091	Model zębów – gryzoń



174093



174091



605960



605961



178260

DENTO-DORM® Pozycjoner

- Stabilizuje temperaturę ciała pacjenta podczas znieczulenia
- Wspiera pozycjonowanie pacjenta, a tym samym zapewnia ergonomię pracy
- Zapobiega ześlizgnięciu się pacjenta, nawet gdy stół zabiegowy jest ustawiony pod kątem
- Jest wodoodporny i ma higieniczną, zamkniętą powierzchnię o małych porach, powierzchnia jest łatwa do czyszczenia i dezynfekcji
- Wykonany ze sztywnej pianki, nie zawiera żadnych chemicznych składników, jest solidny, stabilny wymiarowo i bardzo lekki

Numer art.

- | | |
|--------|---|
| 605960 | <p>DENTO-DORM® Pozycjoner</p> <ul style="list-style-type: none"> • MIHALJEVIĆ • Do zabiegów stomatologicznych, RTG oraz operacji • Zawiera cztery kliny pozycjonowania • Wymiary (w cm): dł. 75 x szer. 30 x wys. 8 |
| 605961 | <p>DENTO-DORM® Pozycjoner wsparcie dla głowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw składa się z 2 klinów podparcia głowy nadaje się do DENTO-DORM® Poduszka pozycjonująca (numer. art. 605960) |

DENTO-DORM® Zestaw gąbek do tchawicy

Wykonana z gumy komórkowej gąbka uszczelniająca do tchawicy, pomocna szczególnie podczas usuwania kamienia nazębnego i zabiegów stomatologicznych. Gąbka do tchawicy DENTO-DORM® ma szczelnie zamknięty otwór wylotowy na rurkę dotchawiczą. Zestaw zawiera 48 gąbek tchawicy i futerał. Gąbki można sterylizować w autoklawie.

Numer art.

- | | |
|--------|---|
| 178260 | <p>DENTO-DORM® gąbka do tchawicy (zestaw)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zawartość: 48 gąbek tchawicznych w 9 różnych rozmiarach od małego kota do dużego psa (12 grubych i 36 mniejszych) |
| 178261 | <p>DENTO-DORM® Zestaw gąbek do tchawicy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opakowanie uzupełniające • Zawiera: 12 grubych gąbek w 3 różnych rozmiarach |
| 178262 | <p>DENTO-DORM® Zestaw gąbek do tchawicy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opakowanie uzupełniające • Zawiera: 36 drobnych gąbek w 6 różnych rozmiarach |

SPIS TREŚCI

D		O		T
DENTANOMIC		Ośłona wiertła dentystycznego		Taca ociekowa z wyjmowaną
Instrumenty dentystyczne.....	27	dla gryzoni (HP)	19	kratownicą
Dentystyczna pasta		Ośłona na tarczę diamentową		Tarcza diamentowa
do polerowania.....	16	(HP)	20	SUPERFLEX
Dłuta.....	26, 30			
Dźwignie stomatologiczne.....	26	P		U
		Plastikowe nasadki polerujące		Unity stomatologiczne.....
F		(HP).....	15	Urządzenie do usuwania kamienia
Frezy dentystyczne do przycinania		Pozycjoner DENTO-DORM®.....	38	nazębnego Cocoon Spray
zębów gryzoni (HP).....	20			
		R		W
I		Raspatory	30	Wątek diamentowy dla gryzoni
Instrumenty dentystyczne		Rękojeści.....	9, 10	(HP).....
dla małych zwierząt.....	30	Rękojeści – czyszczenie i		Wiertła do kątnicy (RA)
		pielęgnacja.....	11	Wiertła do prostnicy (HP)
J		Rękojeść dentystyczna High Speed		17–19
Jednorazowa zakrzywiona		(turbina) (FG).....	9	Wiertła do turbiny (FG)
szpatułka.....	20	Rentgen stomatologiczny	2	Wiertło wykończeniowe (FG)
		Retraktor	31	do turbiny.....
K		Rozwieracze/rozpórki		
Kamień szlifierski	31	policzków dla gryzoni	21, 22	Z
Kielichy polerujące (RA).....	15	Rozwieracze dla małych		Zbiornik na wodę do jednostek
Kleszcze dentystyczne.....	32–33	zwierząt	37	dentystycznych
Kleszcze dentystyczne		S		Zestaw gąbek do tchawicy
dla gryzoni	22–24	Skalery.....	30	DENTO-DORM®
Kleszcze dentystyczne		Skalery do czyszczenia zębów		38
dla kotów i psów.....	31–33	dla małych zwierząt	34	Zestaw startowy do unitu
Kompresor do unitu		Sondy dentystyczne	29	stomatologicznego.....
stomatologicznego.....	9	Spray do konserwacji instrumentów		8
		rotacyjnych	16	Zestawy dentystyczne
L		Spray przeciw kurzowi	16	dla gryzoni.....
Low Speed – silniki pneumatyczne		Środek dezynfekujący do unitów		24, 25
oraz rękojeści dentystyczne	10	dentystycznych	12	Zestawy dentystyczne
Luksatory dla gryzoni.....	23	Środki czyszczące do unitów		dla małych zwierząt.....
Luksatory dla małych zwierząt....	28	dentystycznych	12	34–36
		Stojak do leczenia zębów		
M		dla gryzoni.....	21	
Małe jednostki dentystyczne... ..	13, 14	Stomatologiczny czytnik		
Mobilny stojak dentystyczny.....	12	rengenowski.....	4, 5	
Modele zębów.....	37	Stomatologiczny czujnik		
		rentgenowski	3	
N		Szczotka czyszcząca do wiertel i		
Narzędzia do ekstrakcji	29, 31	frezów.....	16	
Narzędzia do usuwania kamienia		Szpatuła językowa dla gryzoni... ..	22	
nazębnego.....	13			
Nożyczki działkowe	33			

EICKEMEYER Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Polska
T 22 185 55 76
F 22 185 59 40
info@eickemeyer.pl
www.eickemeyer.pl